



CONELOG[®]
SYSTEM

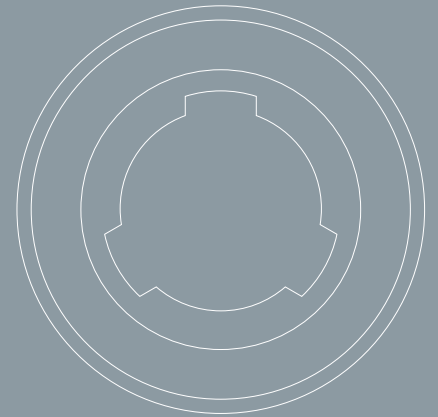

DIE NEUEN TITANBASEN CAD/CAM MIT EIGENER, SPEZIELLER ABUTMENTSCHRAUBE

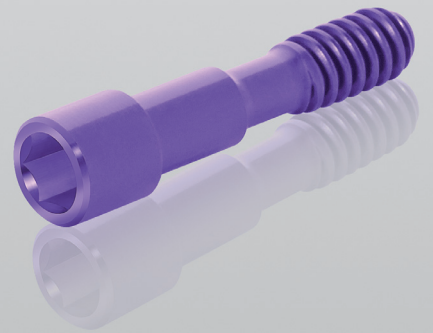

Jetzt mit Sirona kompatibel

a perfect fit™


camlog

NEUE CONELOG® TITANBASIS CAD/CAM – JETZT KOMPATIBEL MIT SIRONA

Die Titanbasen CAD/CAM dienen als Klebebasis für individuell hergestellte Meso- und Suprastrukturen. Zur Erweiterung des Einsatzbereichs wurden die neuen Titanbasen CAD/CAM, die Modellierhilfen und die Abutment- und Laborschrauben in ihren Geometrien zur Aufnahme von Sirona inCoris meso Blöcken angepasst.

Damit die Abutment- und Laborschrauben der Titanbasen CAD/CAM durch den vorgefrästen Schraubenzugangskanal der Sirona inCoris meso Blöcke passen, wurden sowohl der Durchmesser des Schraubenkopfs als auch der Innendurchmesser des Schraubenkanals minimal reduziert. Die Aussenkontur bleibt unverändert.

Die modifizierte Titanbasis CAD/CAM, inklusive einer dunkellila anodisierten Abutmentschraube und einer Klebehilfe mit reduziertem Durchmesser, ist mit neuer Artikelnummer (C2242.xxxx) erhältlich. Die Kompatibilität mit Sirona ist ab den folgenden Chargennummern der Sirona Blöcke gegeben: inCoris ZI meso S Blöcke: ab 2014171452 und höher, inCoris ZI meso L Blöcke: ab 2014161356 und höher.

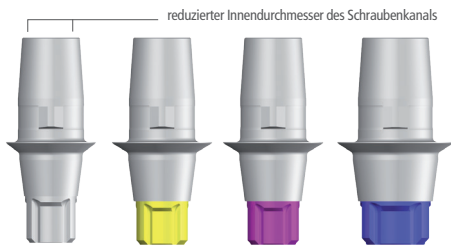


CONELOG® Titanbasis CAD/CAM (neue Artikelnummer)

Art-Nr.: C2242.3308; C2242.3808; C2242.4308; C2242.5008
Art-Nr.: C2242.3320; C2242.3820; C2242.4320; C2242.5020

CONELOG® Modellierhilfe (neue Artikelnummer)

Art-Nr.: C2242.3302; C2242.3802; C2242.4302; C2242.5002

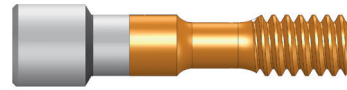


CONELOG® Abutmentschraube für Titanbasis CAD/CAM (mit der Titanbasis CAD/CAM verpackt)

Art-Nr.: C4015.1601; C4015.2001

CONELOG® Laborschraube für Titanbasis CAD/CAM

Art-Nr.: C4016.1601; C4016.2001

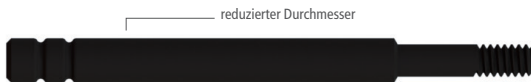

CONELOG® Klebehilfe (mit der Titanbasis CAD/CAM verpackt)

Bitte beachten Sie, dass die neuen Abutment- und Laborschrauben nur in Verbindung mit den Titanbasen CAD/CAM verwendet werden dürfen.

HEADQUARTERS

CAMLOG Biotechnologies AG | Margarethenstrasse 38 | CH-4053 Basel
Tel. +41 61 565 41 00 | Fax +41 61 565 41 01 | info@camlog.com | www.camlog.com